
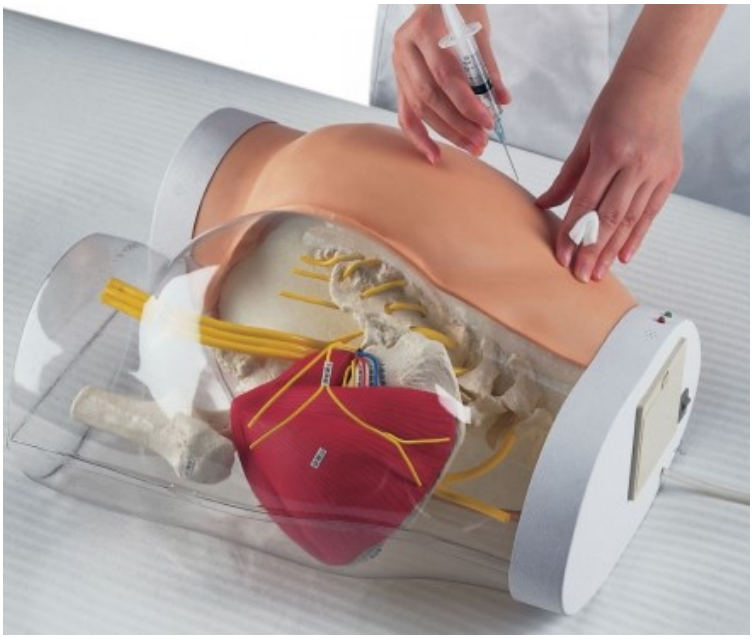


MODELO DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR DE GLÚTEOS


SKU: MFS680
Categorías: Catéteres - Vías Venosas y Arteriales, Inyección, Inyección Intramuscular (IM) - Vacunación, Simuladores Médicos


Copyright © 2021 Medical Factory

GALERÍA DE IMÁGENES

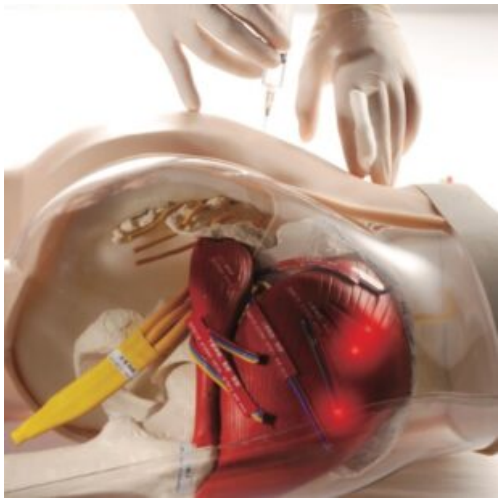




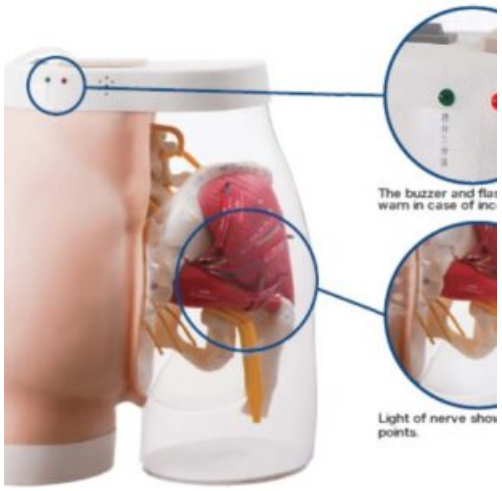

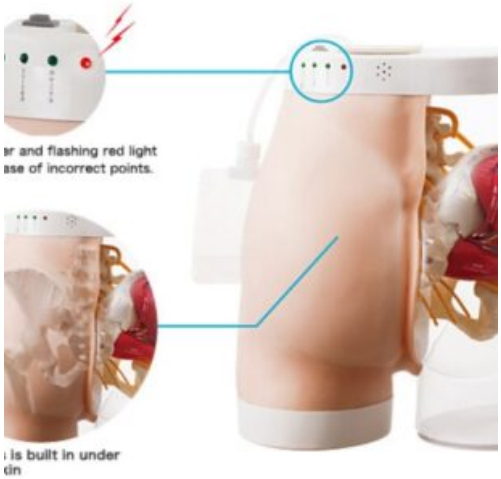

Copyright © 2021 Medical Factory

VARIACIONES

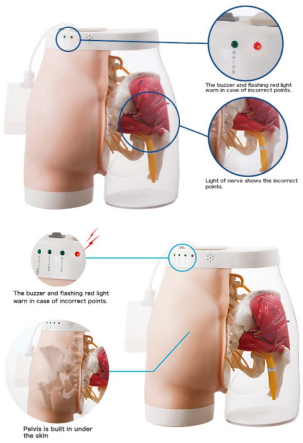Imagen	SKU	Versión
	MFS681	Tipo I
	MFS682	Tipo II

Copyright © 2021 Medical Factory

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pelvis diseñada para la práctica de inyección para corregir los sitios de inyección.

Versiones:
- Versión I: Permite la práctica del método Shibusanbu (Cuadrante superior externo de glúteos).
- Versión II: Permite la práctica de 3 sitios de inyección el método Shibusanbu y los puntos de Clarke y Hochstetter se establecen en el modelo.

Características:
- La pelvis está incorporada y se puede practicar la identificación del lugar de la inyección palpando la cresta ilíaca y el trocánter mayor.
- La luz verde se enciende cuando se inserta una aguja en una región segura.
- La luz roja se enciende y suena una campanilla de advertencia cuando el lugar de la inyección es incorrecto o la inserción es demasiado profunda, incluso en un punto seguro.
- El agua (solo agua del grifo) se puede infundir.

Versión Tipo I Contiene:
- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Bolsa de drenaje; 1 Estuche de almacenamiento.

Versión Tipo II Contiene:
- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Bolsa de drenaje; 1 Soportes para colocar el modelo en posición lateral; 1 Estuche de almacenamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=8FbYC9cPhUI
https://www.youtube.com/watch?v=VILwfGcpGiw

Copyright © 2021 Medical Factory