




SIMULADOR DE CATETERISMO Y DE ENEMA

SKU: 110-900

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

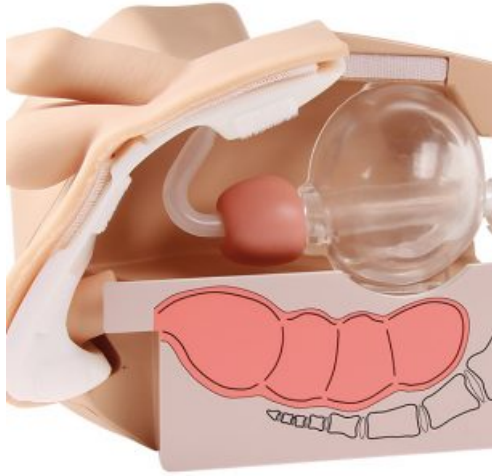

VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



111-000

Femenino



111-100

Masculino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de pelvis con órganos genitales para la práctica de cateterismo y enema de glicerina, limpieza y desinfección de los genitales. En el caso masculino se puede practicar la fijación del pene.

Disponible en 2 versiones:

- Versión Masculina.
- Versión Femenina.

Versión Masculina:

El simulador de pelvis con órgano genital masculino, imita la forma del canal uretral peculiar de un hombre, se inserta un catéter de cateterización de acuerdo con una técnica adecuada para llegar a la vejiga. Esto hace que la orina (agua) fluya hacia afuera.

Versión Femenina:

Se inserta un catéter de cateterización de acuerdo con una técnica adecuada para alcanzar la vejiga. Esto hace que la orina (agua) fluya, la sensación de los labios es muy similar a la de un cuerpo vivo.

Características:

- Fabricado con materiales especiales, lo que hace que en la práctica se sienta realista el tacto con la piel.
- El simulador es de un tamaño real por el cual se puede practicar un cateterismo y un enema de glicerina.
- Dado que los materiales blandos y estirables se utilizan para el área púbica, la apariencia y la sensación son realistas para dar presencia cuando se practica.
- Se puede practicar una serie de técnicas de cateterización, como la desinfección del área púbica, la inserción, la fijación y la extracción de un catéter.
- Tiene una forma que imita la flexión de la porción angulosa escrotal del canal uretral y la uretra bulbar, es decir, está configurado de tal manera que es difícil insertar el catéter si el pene no se levanta adecuadamente.
- Se pueden realizar técnicas, tales como pelado del prepucio, desinfección y limpieza.
- El movimiento del pene también es similar al de un pene de cuerpo vivo. Esto permite la práctica de la fijación del pene.
- El cuerpo principal se puede separar, y el canal uretral y la vejiga son transparentes. Esto permite instrucciones para verificar el estado de inserción del catéter en el canal uretral y el globo en la vejiga.
- Al cambiar la próstata, se puede reproducir la estenosis uretral debida a la hipertrofia (versión masculina).
- La herramienta adjunta exclusiva de un enema de glicerina se puede insertar a través del ano hasta el recto. Esto permite la práctica para el enema de glicerina.