




SIMULADOR DE EXAMINACIÓN DE FONDO DE DE OJO

SKU: MFS569

Categorías: [Especialidades Médicas](#),
[Examinación de Ojo](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

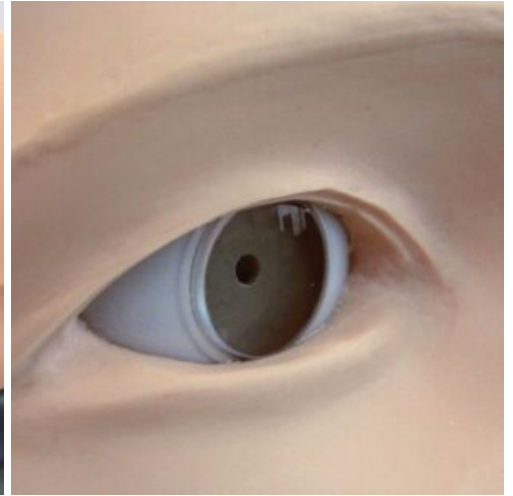

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS570	3 Pasos
	MFS571	2 Pasos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador práctico de examen de fondo de ojo con 10 imágenes y variaciones clínicas. Es compatible con oftalmoscopios reales y varios casos se pueden representar cambiando las imágenes y diámetro de la pupila.

Habilidades:

-Examen de fondo con oftalmoscopia directa.

Versiones:

- 2 Pasos: 3,5 ; 8 mm diámetro.

- 3 Pasos: 2; 3,5 ; 5 mm diámetro.

Características:

- 10 imágenes de fondo de ojo de casos de enfermedades oculares comunes.
- Imágenes clínicas reales.
- Unidades de globo ocular con lente que simulan el eje visual de los ojos humanos.
- Material blando y suave que hace el contorno del párpado realista.
- Profundidad ajustable de las diapositivas de fondo:hipermetropía, normal y miopía.
- Diferentes tamaños de pupila se pueden ajustar en las versiones de 3 pasos y 2 pasos.

Contiene 10 patologías comunes:

- Ojo normal.
- Retinopatía hipertensiva, vasoconstricción arteriolar grado I, arterioesclerosis grado I, hemorragias y manchas algodinosas, obstrucción venosa simple.
- Retinopatía diabética simple: microaneurismas, hemorragias y exudados complejos.
- Papiledema (fase crónica).
- Papiledema (fase aguda).
- Atrofia óptica glaucomatosa: excavación glaucomatosa óptica y defecto de la rama del nervio óptico.
- Oclusión de la vena central de la retina (fase aguda): hemorragia en llama y manchas algodinosas.
- Oclusión de la vena central de la retina (después de una foto coagulación retiniana con láser).
- Toxoplasmosis: retinocoroiditis.
- Degeneración macular senil: exudados maculares y hemorragia retiniana.

Contiene:

- 1 Simulador de examen de ojo; 1 Portador de Imágenes; 1 Soplador; 1 Set de imágenes de casos; 1 Limpiador de imágenes; 1 Caja de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones; Piezas de repuesto no incluidas a consultar con el proveedor: Diapositiva de casos de fondo de ojo (set de 10 casos).

