

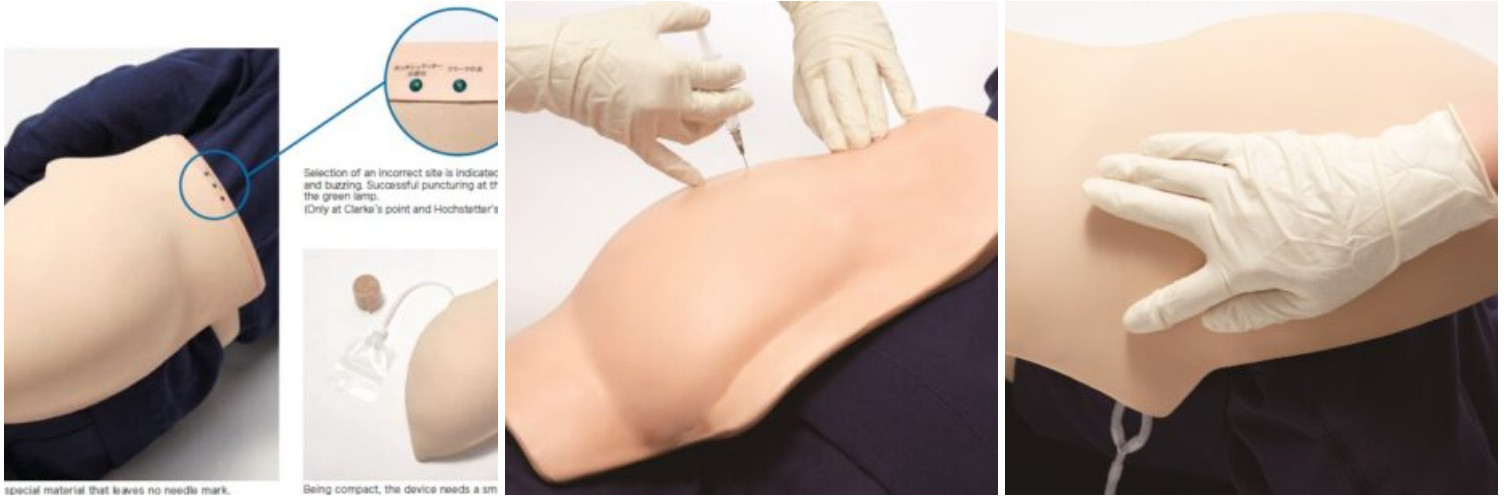


SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR "BUTTOCKMATE"


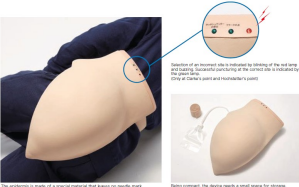
SKU: MFS685

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

| Imagen | SKU | Versión |
|--|--------|---------|
|  | MFS686 | Tipo I |
|  | MFS687 | Tipo II |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de almohadilla que se ajusta al cuerpo de un paciente real y permite la práctica de inyección en la zona de los glúteos mediante palpación con el método "Shibusanbu" (cuadrante superior externo de glúteos), y los puntos "Clarke" y "Hochstetter".

Versiones:

- Versión Tipo I: Permite la práctica con el método "Shibusanbu", y el dibujo del lugar de la inyección está escrito en un paquete transparente además de permitir la práctica individual.
- Versión Tipo II: Permite la práctica en los puntos de "Clarke" y "Hochstetter". Además, Este modelo permite la simulación en decúbito lateral.

Los puntos de referencia esqueléticos como las espinas ilíacas anterosuperior y anteroposterior y el trocánter mayor pueden palparse para un entrenamiento eficaz en la búsqueda del lugar de la inyección, además permite inyectar líquido (agua) y no la solución en droga.

Característica

- Permite el entrenamiento en pareja desempeñando el papel de enfermera y paciente alternativamente.
- Como la cresta del ilion, el trocánter mayor y la espina ilíaca están incorporados, la confirmación y la práctica de la técnica de inyección de glúteos mediante palpación están disponibles.
- El tacto de la piel y el marco que están muy cerca del cuerpo vivo contribuyen en gran medida a aprender la habilidad de inyección de glúteos.
- La luz roja intermitente y el timbre advierten en caso de que se pierda la inyección en un punto incorrecto o una inyección demasiado profunda, aunque se haya realizado en el punto correcto. La luz verde se enciende en caso del punto correcto.
- La superficie es similar a la piel real por su proceso específico que no queda ninguna marca de aguja, aunque se use repetidamente.

Versión Tipo I contiene:

- 1 Modelo de formación; 1 Cinturón; 1 Bolsa de drenaje; 1 Paquete transparente; 1 Estuche de almacenamiento.

Versión Tipo II contiene:

- 1 Modelo de formación; 1 Cinturón; 1 Bolsa de drenaje; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=Wl8ufUa2SDw>

<https://www.youtube.com/watch?v=3CUVGmO1Isg>