








**SIMULADOR DE PERRO PARA
RADIOGRAFÍA - TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA - ULTRASONIDO**

SKU: MFV257

Categorías: [Especies](#), [Imagen](#), [Radiología - Rayos X](#), [Simuladores Caninos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

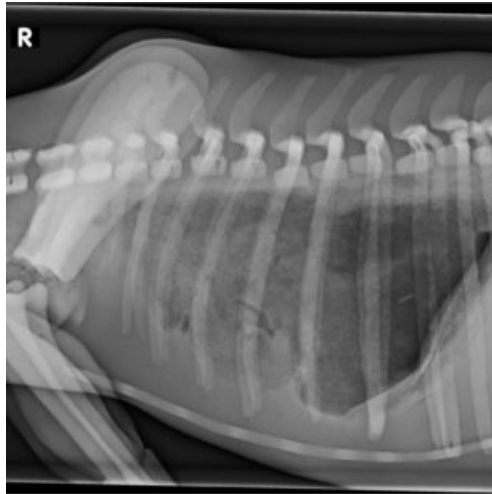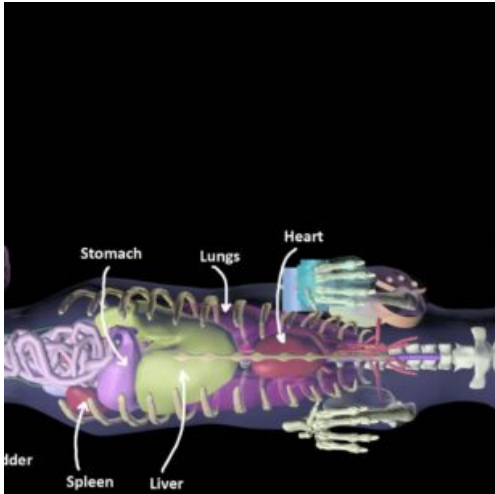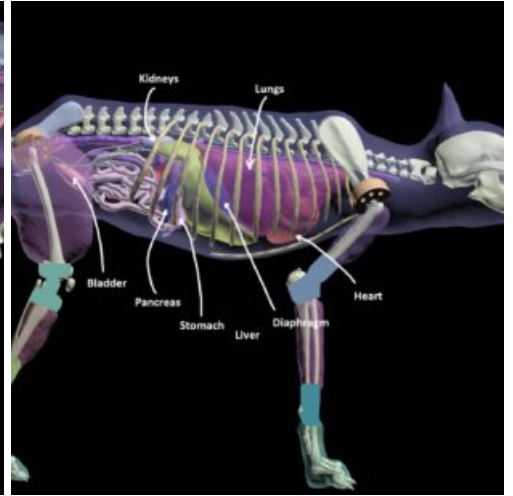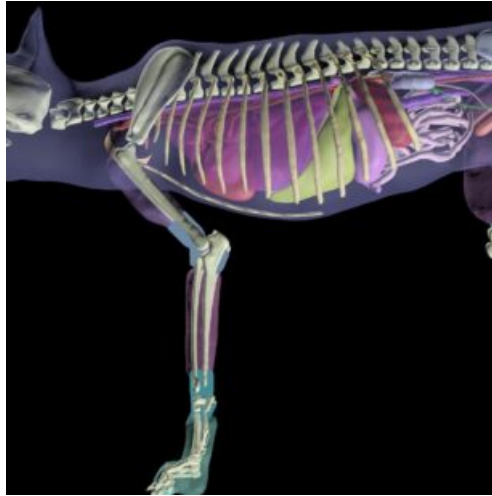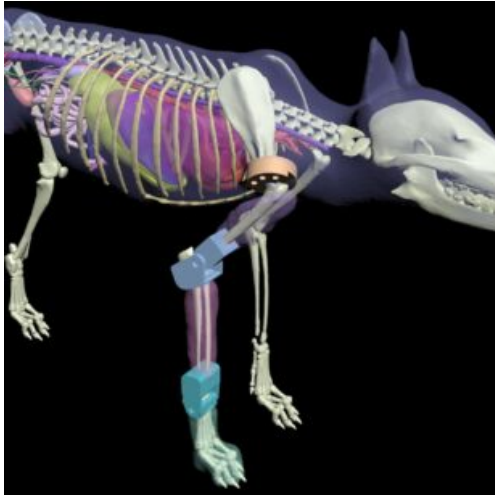

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí desmontable para perros es un simulador de formación independiente de hardware y software externos. El fantoma es compatible con imágenes de ultrasonidos y rayos X/Tomografía computarizada. Tiene todas las características adecuadas para ser una herramienta de enseñanza ideal para ecografistas, radiógrafos, residentes de veterinaria y otros profesionales veterinarios.

Tiene estructuras anatómicas mejoradas y partes del cuerpo desmontables (cabeza, extremidades, torso y cola). Esta mejora es una ventaja añadida, ya que ayuda a realizar diversas técnicas de posicionamiento bajo las modalidades de imagen, ultrasonido, rayos X/Tomografía computarizada.

El simulador viene por defecto en un aspecto translúcido color ambar, puede solicitarse una versión opaca del producto. Consulte para mayor información (puede incurrir en un costo adicional).

Adicionalmente el modelo puede incluir un maletín de transporte. Consulte para mayor información (puede incurrir en un costo adicional).

Anatomía:

- Cabeza de perro adulto: Cráneo de perro; Hueso de la mandíbula; Cerebro de perro realista.
- Brazos Delanteros de Perro Adulto: Brazo (Húmero); Articulaciones del codo; Antebrazo (Radio, Cúbito); Pata (muñeca con dedos); Material que imita la piel.
- Piernas traseras del perro adulto: Muslo (Fémur); Articulaciones de la rodilla; Pierna (tibia, peroné); Pata (huesos de los dedos); Material que imita la piel.
- Cola de perro adulto: Hueso de la cola; Material que imita la piel.
- Torso de perro adulto: Columna vertebral completa; Caja torácica completa; Hombro (huesos de la escápula); Pelvis; Corazón; Vasos sanguíneos conectados al corazón; Pulmones; Diafragma; Estómago; Hígado y vesícula biliar; Riñones; Bazo; Páncreas; Arterias renales; Vejiga; Uréteres y útero; Intestino Grueso e Intestino Delgado.

Incluido:

- Simulador de Perro; Manual del usuario/Instrucciones de montaje.

Materiales utilizados:

- Tejidos blandos y órganos: Composición de resina blanda a base de uretano.
- Huesos sintéticos: Material compuesto patentado a base de epoxi reforzado con cerámica.

<https://www.youtube.com/watch?v=aG2IVE7tjxk>

<https://www.youtube.com/watch?v=Q3imx7x6DQc>