



## SIMULADOR PARA MANEJO DE LA VÍA AÉREA DIFÍCIL - SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO

---

**SKU:** MFS586

**Categorías:** [Manejo de Vía Aérea - Intubación,](#)  
[RCP - DEA - Emergencias,](#) [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES

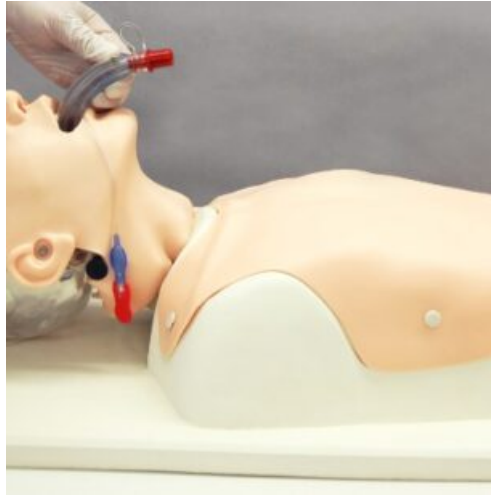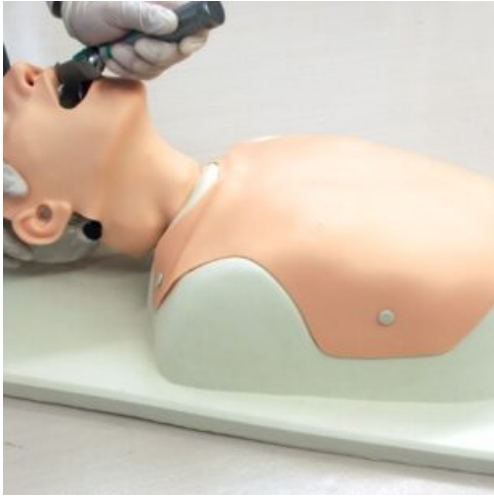

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador suministra entrenamiento para usuarios de todos los niveles de experiencia con disponibilidad de 24 casos diferentes, su estructura robusta y la base estable lo hacen compatible para los varios escenarios de entrenamiento tales como emergencia, pre-hospital o escenarios clínicos.

En este modelo se puede practicar con un laringoscopio, Bolsa-Válvula-Máscara, o un video laringoscopio.

Habilidades:

- Técnicas de apertura de las vías respiratorias (inclinación de la cabeza, empuje de la mandíbula).
- Ventilación Bolsa-Válvula-Mascarilla.
- Evaluación de la vía aérea previa a la intubación.
- Recreando la posición de olfateo.
- Presurización de laringe externa para mejorar la visión laríngea.
- Intubación intraoral / intranasal.
- Uso de vía aérea orofaríngea (OPA).
- Uso de vía aérea nasofaríngea (NPA).
- Uso de mascarilla laríngea.
- Uso de video laringoscopio.
- Confirmación de una ventilación satisfactoria mediante: la observación del movimiento torácico y abdominal (expansión de los pulmones, hinchamiento del estómago) o auscultación del tórax.
- Simula procedimientos incorrectos que incluyen intubación en el esófago e intubación unilateral.
- Practique cómo asegurar los tubos después de la intubación.

Equipos recomendados:

- Laringoscopio Macintosh: tamaño de la hojilla 3, 4.
- Tubo traqueal: diámetro interno 7.0mm, 7.5mm.
- Máscara laríngea (Air-Q: tamaño 3.5; LMA Suprema: tamaño 4; I-gel: tamaño 4).

Características:

- 24 Variaciones del escenario del paciente (incluido 1 caso normal): 3 Etapas de apertura de la boca, 2 etapas de flexibilidad del cuello, 2 tamaños de lengua y 2 posiciones de las cuerdas vocales.
- Los incisivos superiores están diseñados para romperse cuando se aplica una fuerza excesiva.

Contiene:

- 1 Maniquí; 3 Incisivos superiores; 1 Lubricante; 1 Jeringa; 1 Caja de transporte; 1 Manual de instrucción.

<https://www.youtube.com/watch?v=J1BGUiUwxvU&t=60s>

